


# Early Warning Score

Cálculo automático basado en el dispositivo



Cálculo de verificación inmediata con sello de hora/fecha

Marcadores contribuyentes, sin valores medidos

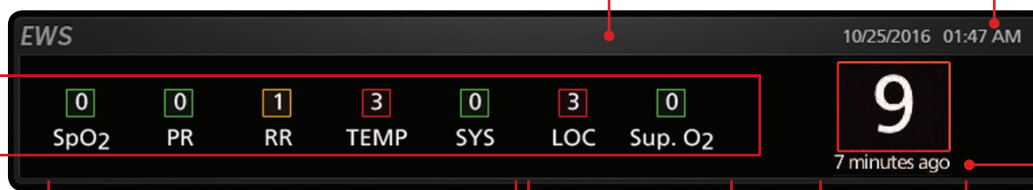

Tiempo transcurrido desde el último cálculo de EWS

Basado en las mediciones de Root®

Basado en los datos de entrada del médico

Early Warning Score acumulado

- > El Early Warning Score (EWS) lo inicia el médico y se calcula automáticamente
- > Los marcadores contribuyentes EWS se calculan mediante los valores medidos y la entrada de datos del médico y, a continuación, se combinan en un EWS acumulado
- > Root dispone de una visualización de interpretación inmediata y alta visibilidad con navegación intuitiva de pantalla multitáctil para un uso sencillo y adaptable en entornos de hospitales

# Soluciones de conectividad avanzada con Patient SafetyNet™\* o Iris Gateway™

## Asociación del paciente con dispositivos de cabecera



Funciona en interfaz con el sistema HL7 de ingreso, alta y transferencia (ADT) del hospital para asociar al paciente, al dispositivo y al médico en la cabecera

## Creación de registros electrónicos automatizada



Root captura los datos del paciente, incluidos los EWS




Patient SafetyNet o Iris Gateway convierten los datos en HL7



Patient SafetyNet o Iris Gateway automatizan la transferencia de datos al EMR del hospital

## Creación manual de registros electrónicos en la cabecera

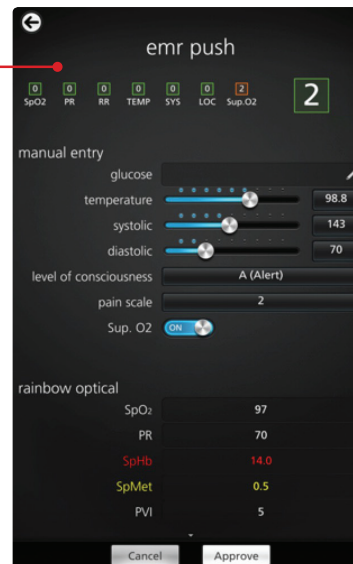

Para simplificar la documentación de los datos de los pacientes, los médicos también pueden introducir y verificar manualmente los datos en Root, incluido el nivel de conciencia, la escala de dolor y la diuresis, y enviarlo al EMR

\* La marca comercial Patient SafetyNet se utiliza bajo licencia de University Health System Consortium

Para uso profesional. Consulte las instrucciones de uso para obtener la información completa de prescripción, que incluye indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

**Masimo U.S.**  
Tel: 1 877 4 Masimo  
info-america@masimo.com

**Masimo International**  
Tel: +41 32 720 1111  
info-international@masimo.com

